


TuBo-Lock Set

Endotracheale tube

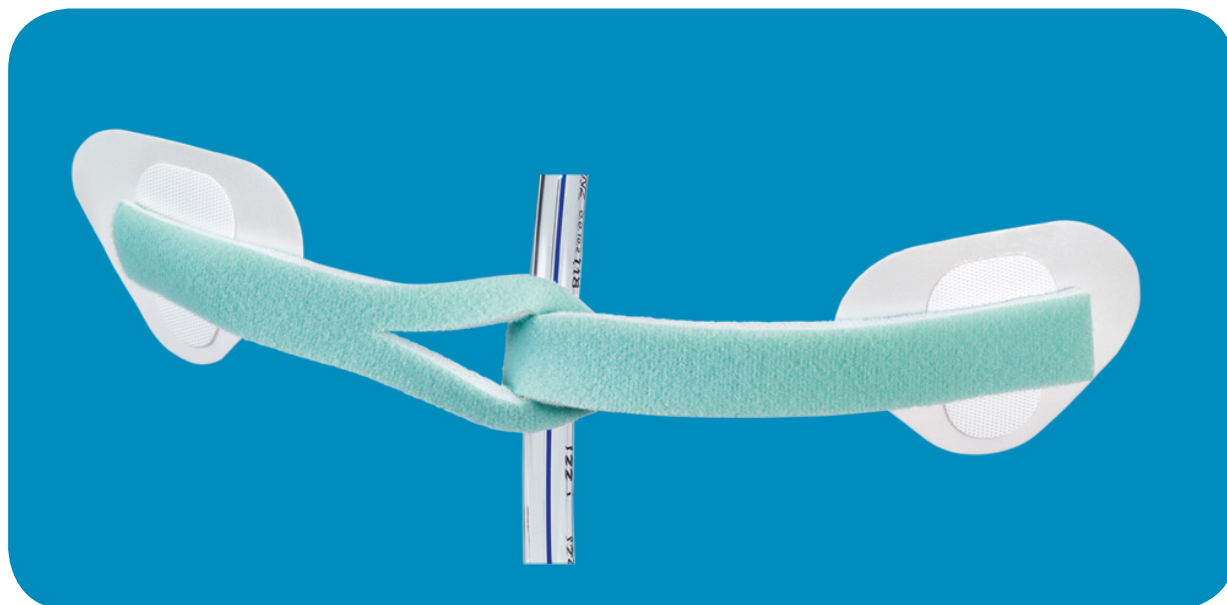

TuBo-Lock Set is een 3-delige fixatie voor Endotracheale tubes voor volwassenen en kinderen.

Deze set bestaat uit twee huidvriendelijke wangpleisters en een middengedeelte (= zachte fixatieband).

De fixatieband van de **TuBo-Lock** wordt met behulp van een kleefstrip en in een lus rond de tube optimaal en veilig gefixeerd.

TuBo-Lock Set is erg economisch.

In het geval van een contaminatie kan de fixatieband worden vervangen. De pleisters kunnen dan op de wang blijven zitten.

De absoluut innovatieve fixatie en positionering van de TuBo-Lock fixatieband op het zachte foam van de wangpleisters maakt het mogelijk om de pleisters maximaal aan de contouren van het gezicht aan te passen.

De pleisters worden verticaal uitgelijnd op de wangen aangebracht om de grootste flexibiliteit van de fixatieband tijdens het mogelijk her-positioneren van de tube.

TuBo-Lock Set is de optimale combinatie van het gebruik van innovatieve materialen en bewezen proces ontwikkeling.

TuBo-Lock Set

TuBo-Lock Set	25-10	2x wangpleister + fixatieband
TuBo-Lock Set extra lang *	25-11	2x wangpleister + fixatieband
TuBo-Lock midden stuk	25-15	lengte 28 cm
TuBo-Lock midden stuk extra lang *	25-16	lengte 36,5 cm

* nog niet beschikbaar!