




C-PURE 750™ Rookevacuatie Systeem

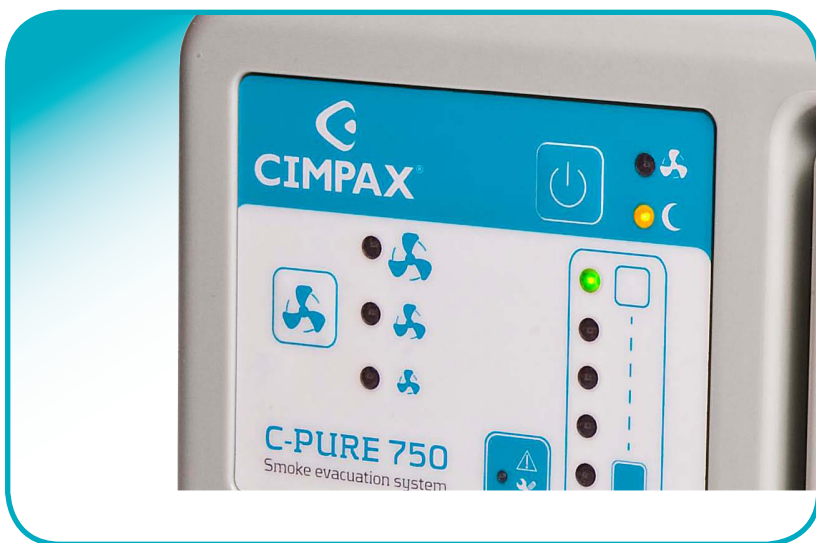

CIMPAX® C-PURE 750™
Rookevacuatie systeem voor het verwijderen van laser en
electrochirurgische rook

CIMPAX® C-PURE is een zeer stil eenvoudig rookevacuatie systeem. Het C-PURE 750 rookevacuatiesysteem overtreft alle verwachtingen van prijs en efficiëntie.

Het unieke 3-poort filter biedt een scala aan opties bij het kiezen van accessoires om aan de klinische behoefte te voldoen. C-PURE 750 is eenvoudig in het gebruik en is zeer flexibel in de opties voor slangen, sets en toebehoren welke borg staan voor een geruisloze werkwijze. C_PURE voorziet in een effectieve rookverwijdering met 4 filtratie niveaus en met een werkduur van 35 uur. C-PURE 750 biedt de prestaties die nodig zijn voor een effectief beheer van chirurgische rook met een onovertroffen resultaat.

Werkt met externe sensor activator, controle paneel of een voetpedaal is mogelijk..

- Compact ontwerp maakt het eenvoudig plaatsen op een plank of tafel mogelijk. De apparatuur is stapelbaar
- De stille en krachtige werking draagt bij tot een probleemloze en veilige werksituatie.
- De maximale levensduur van het filter, 35 uur, levert een onovertroffen bijdrage en vermindert de kosten per procedure aanzienlijk
- Het ontwerp van het 3-poorts filter biedt u een vrije keuze van de slang en accessoires en voorkomt het inzetten van adapters
- Afgeschermd filter poorten dragen bij tot extra veiligheid
- De eenvoud reduceert de behoefte aan training en optimaliseert het gebruik



Order informatie

C-PURE 750 230VAC ±10% 50Hz/60Hz Dim.:15.2cm H x 27.9 cm W x 39.4 cm D, Gewicht: 4.5kg

Ref. C32-01-750

Sensor voor automatische remote activatie van C-PURE 750 met 2-10 seconden vertragingsoptie.

Ref. C32-10-002

Ulpa/Carbon Filter voor C-PURE 750 met 22/9,5/6,4mm connectie, maximale filter levensduur: 35 uur

Ref. C32-25-001

Accessoires

C-VAC TORNADO TM geïntegreerde rookevacuatie pen

4 meter snoer, PVC en phthalate vrij ESU kabel met

US-3-pin connector en 3 meter PVC en phthalate vrije

slang met gecombineerde 9,5/15/22mm connector. Eenmalig gebruik.

Met 70 mm standaard blad electrode

Ref. C31-19-001

Met 70 mm gecoate blad electrode

Ref. C31-19-101

Verpakking: Doos a 10 stuks, steriel.

Uitzuigtip verlengstuk, doos a 25 stuks, steriel

Ref. C31-15-145

Onze distributeur:

vision medical company

Vluchtoord 3a
5406 XP Uden

Tel.: 0413 820200

Fax: 0413 820201

www.visionmc.nl